


# コムフィール プラス

より早い創傷治癒を目指して

創傷の保護

創傷のモニタリング

使いやすいデザイン

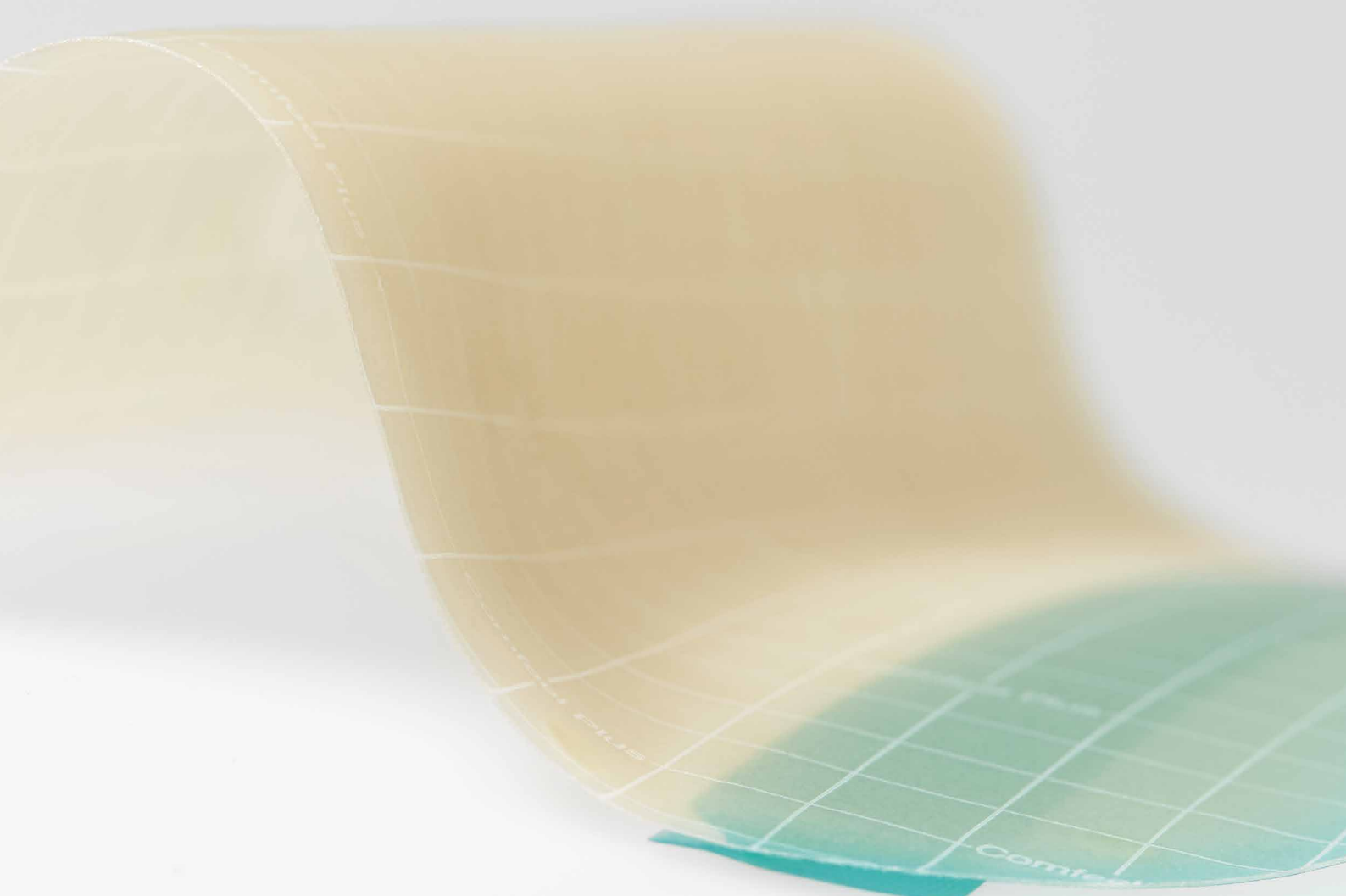

Comfeel® Plus

# コムフィール プラス

## 柔軟性と伸縮性のあるハイドロコロイド ドレッシング

### 特長



#### 創傷の保護

- 湿潤環境下で創傷治癒を促すカルボキシメチルセルロース、アルギン酸カルシウムを配合したハイドロコロイドドレッシング
- 水や細菌から創傷を保護しながら水蒸気蒸発可能な半透過性トップフィルム
- テーパーエッジ加工によりめくれ上がりを防ぐ辺縁部



#### 創傷のモニタリング

- 創傷のモニタリングが容易で交換の目安になるグリッド線
- 創傷が見やすいため、交換頻度を減らすことにより、より早い治癒が可能



#### 使いやすいデザイン


- 無菌的な貼付を可能にする3片の剥離紙によるノンタッチシステム
- 剥がす場所が分かりやすいターコイズブルーの剥離紙
- 製品選択が容易なパッケージデザイン

### 製品構造

ポリウレタントップフィルム

ハイドロコロイド粘着層

粘着面への指の接触を防ぐ2層構造の剥離紙

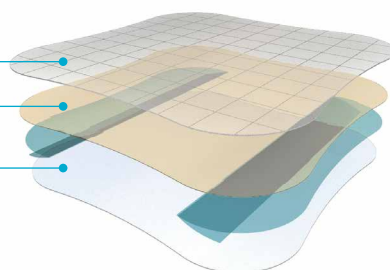

### 製品一覧



製品名	製品番号	サイズ	保険算定面積	包装単位
コムフィールプラス	33146	4cm × 6cm	24cm <sup>2</sup>	30 枚 / 箱
	33110	10cm × 10cm	100cm <sup>2</sup>	10 枚 / 箱
	33115	15cm × 15cm	225cm <sup>2</sup>	5 枚 / 箱
	33120	20cm × 20cm	400cm <sup>2</sup>	

### 使用目的又は効果

皮下脂肪組織までの創傷(Ⅲ度熱傷を除く)に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

販売名：コムフィール プラス

高度管理医療機器

一般的名称：二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材

医療機器承認番号：30100BZX00141000

保険機能区分：皮膚欠損用創傷被覆材 皮下組織に至る創傷用 標準型

保険適用期間：2週間を標準とし、特に必要と認められる場合については3週間を限度とする

製造発売元

コロプラスト株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル11F

[www.coloplast.co.jp](http://www.coloplast.co.jp) ☎ 0120-664-469

©2020-02 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020-02. All rights reserved Coloplast A/S

