

ペリスティーンプラス

バルーンカテーテル
より使いやすいデザインへ



Peristeen® Plus

日々の排便に伴う不安が解消されます。 そして、快適で活動的な毎日を過ごすことができます。

ペリスティーンプラスは2018年4月に保険適用された経肛門的洗腸療法に用いられる医療機器です。

システムの特長

① ウォーターバッグ

バッグを床に置いて使用することができます。

② コントロールユニット

ポンプで水の注入速度を調整できます。

③ バルーンカテーテル

親水性コーティング*が施されています。

バルーンを膨張させて直腸を密封します。

④ 適温表示インジケーター

水温が適切な範囲にあるかどうかを示す目安です。



親水性コーティング：水に浸すことでコーティング剤が活性化されてツルツルになるため、潤滑剤が不要です。

バルーンカテーテル(大)を使用する場合

	製品名	製品番号	内容	包装単位	価格(税抜)
			コントロールユニット	1個	
	ペリスティーンプラスシステム (大)	29140	バルーンカテーテル(大)	2本	¥13,000
			ウォーターバッグ(キャップ有)	1袋	
			チューブ	1本	
			ストラップ	2本	
	ペリスティーンプラス付属ユニット (大)	29142	バルーンカテーテル(大)	15本	¥24,000
			ウォーターバッグ(キャップ無)	1袋	

バルーンカテーテル(小)を使用する場合

	製品名	製品番号	内容	包装単位	価格(税抜)
			コントロールユニット	1個	
	ペリスティーンプラスシステム (小)	29147	バルーンカテーテル(小)	2本	¥13,000
			ウォーターバッグ(キャップ有)	1袋	
			チューブ	1本	
			ストラップ	2本	
	ペリスティーンプラス付属ユニット (小)	29149	バルーンカテーテル(小)	15本	¥24,000
			ウォーターバッグ(キャップ無)	1袋	

備品(予備品)


	製品名	製品番号	内容	包装単位	価格(税抜)
	チューブ	29146	チューブ	2本	¥4,000



使用動画はこちらより
ご覧いただけます

販売名：ペリスティーン トランスアナルイリゲーション
医療機器認証番号：302ACBZX00039000
一般的名称：直腸用チューブ
管理医療機器

経肛門的洗腸療法とは

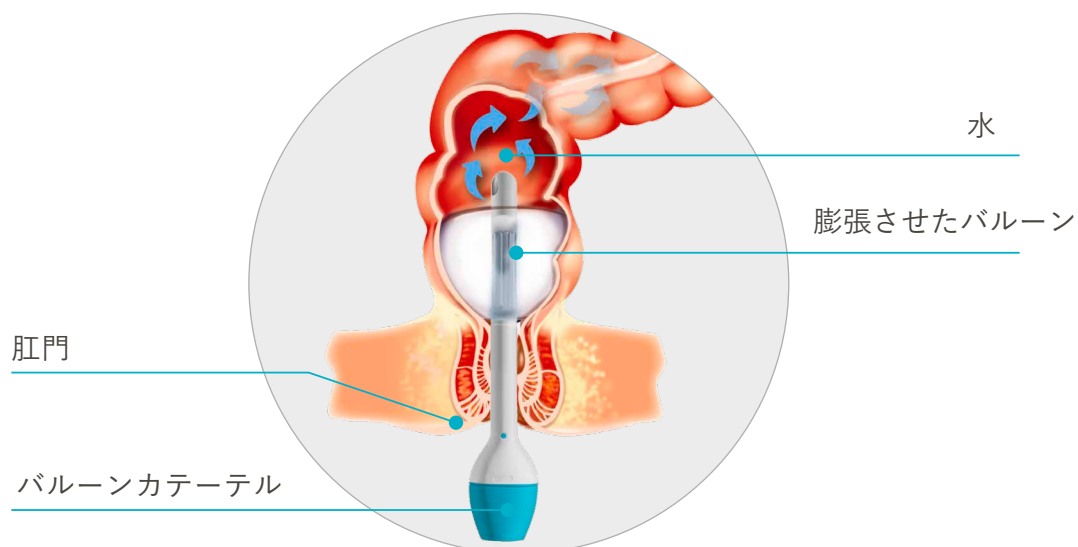


経肛門的に直腸にカテーテルを挿入し、1～2日に1回、300～1,000mlの体温程度の水を経肛門的に直腸に注入することにより、便を排出する排便管理方法です¹⁾。

経肛門的洗腸療法の効果

注入した水と一緒に直腸から下行結腸の便を排出することで、便失禁や便秘の症状を改善できます²⁾。

排便に問題を抱えている患者における経肛門的洗腸療法の前後の画像

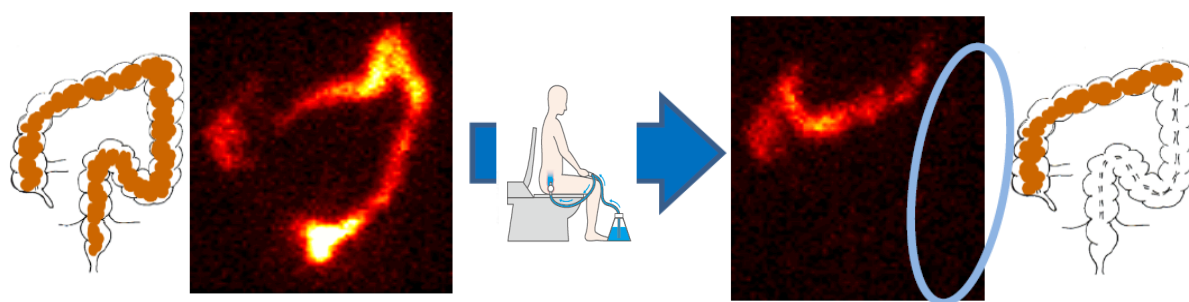

※写真は、糞便を放射線同位元素で標識したシンチグラフィー画像

1) 日本大腸肛門病学会.経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針（経肛門洗腸療法について）2020;22-23.
2) Christensen P, Olsen N, Krogh K, Bacher T, Laurberg S. Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. Dis Colon Rectum 2003;46:68-76.

コロプラスト株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 11F
www.coloplast.co.jp ☎ 0120-664-469

©2022-5 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved Coloplast A/S



制作年月：2022.5 / 99288N